

# ZoneTAPE

## SOFT SİLİKON BANT

[www.medzone.com.tr](http://www.medzone.com.tr)

### ZONETAPE SOFT SİLİKON BANT NASIL KULLANILIR

ZoneTAPE Soft Silikon Bant, gerekli alana uygulandıktan sonra 48 saat boyunca çıkarılmamalıdır. Ancak;

Vücut doğal yağ dengesi ve yağlanması, günlük sosyal aktiviteler neticesinde oluşabilecek terleme, yaz aylarındaki yüksek hava sıcaklığı vb. gibi etkenlerden dolayı ürün 48 saatten erken bir sürede uygulandığı bölgeden ayrılsa yenisi ile değiştirilmesi gerekebilir.

Ayrıca kullanıcı tarafından günlük banyo tercih ediliyorsa her banyo sonrasında yine ürün yenisi ile değiştirilmelidir.

ZoneTAPE Soft Silikon Bant, scar / keloid oluşumunun eskiliğine bağlı olmakla birlikte en az 2 ile 6 ay süresince kullanılmalıdır. Bu süre zarfında uygulama bölgesi istenilen iyileşmeye ulaşınca ürün sonlandırılmalıdır.

#### SAKLAMA KOŞULLARI


Serin ve kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir.

#### KONTRENDİKASYONLARI

Silikona alerjisi olan bireyler kullanılmamalıdır.



FDA CE ÜTS

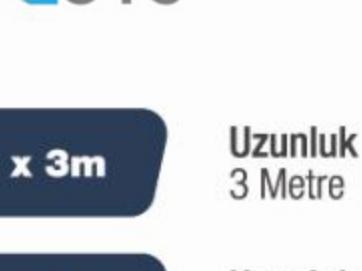

SCAR VE KELOİD TEDAVİSİNDE



LAPAROSKOPIK CERRAHI



ESTETİK OPERASYONLARI SONRASI




DOĞUM SERVİSİ

Vücudumuzda oluşan hasarı bölgelerde aşırı hücre üretiminden kaynaklanan yara iyileşmesi sonucu doku katmanı oluşur. Bu katmanın deri rengini alması ve deri ile aynı seviyeye ulaşması için Zonetape soft silikon yara izi bandı iyi bir tedavi malzemesidir.

Zonetape soft silikon yara izi bantları; burun, meme, karın, bacak ve mide ameliyatları (Laparoskopik cerrahi) gibi birçok estetik ve cerrahi operasyon sonrası kullanılabilir. Özellikle kilo kayıpları nedeniyle yapılan germe ameliyatları, tüm estetik cerrahi operasyonlar sonrası deride oluşacak izlerin giderilmesinde çok önemli bir rol almaktadır.

Zonetape soft silikon yara izi bantları; sezaryen operasyonu sonrası cilt de oluşacak dikiş izlerinin ve / veya keloidlerin engellenmesi için kullanılmaktadır.

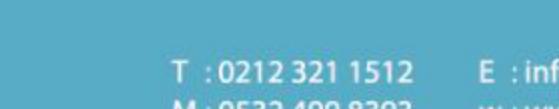

ZONETAPE 2cm x 3m

Uzunluk

3 Metre

Genişlik

2 Santimetre

ÜTS NO

6972864360061

ZONETAPE 4cm x 1.5m

Uzunluk

1.5 Metre

Genişlik

4 Santimetre

ÜTS NO

6970849093355

## İletişim

T : 0212 321 1512

M : 0532 499 8393

E : info@medzone.com.tr

w : www.medzone.com.tr

Merkez Mah. Kağıthane Cad.

Seçkin Sokak Dap Vadisi Z Ofis Binası,

No:2-4/A, Kat:0 Bağımsız Bölüm: 103

İstanbul/Kağıthane



**MEDZONE**  
HEALTH